



МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА И СТОМАТОЛОГИЯ



DIPLOMAT



Стоматологические решения для мирового рынка

SINCE 1962



МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА И СТОМАТОЛОГИЯ



DIPLOMAT-DENTAL имеет более чем 50-летний опыт производства медицинской и стоматологической техники, закрепив за собой прочную репутацию топ-производителя, придерживающегося бизнес-философии, согласно которой удовлетворение требований клиентов ставится на первое место. Для нас чрезвычайно важны сертифицированная система качества и высокий технический уровень, но самое главное – это надежность и безопасность продукции. Компания DIPLOMAT-DENTAL производит стоматологические установки, стулья и светильники под известным брендом DIPLOMAT. Вся продукцию отличают качество, эргономика и универсальность, что гаран-

тировано удовлетворит потребности даже самых требовательных стоматологов. Главная цель нашей компании – сделать так, чтобы пользователи продукции DIPLOMAT во всем мире были довольны.

«Мы производим качество»

Этот слоган иллюстрирует отношение компании к каждой детали своей работы. В производственный процесс постоянно внедряются инновационные решения, т.к. мы хотим быть уверенными в том, что выпускаем лучшее, и наши клиенты могут оценить эффективность передовых технологий. Наши специалисты используют новейшие технологические ре-

шения и стратегии, чтобы улучшить эргономику, усовершенствовать системы безопасности, оптимизировать уход за оборудованием и облегчить его эксплуатацию. Наряду с выпуском высокотехнологичной продукции, мы также обеспечиваем превосходный гарантийный сервис, который включает в себя ремонт и регулярное техобслуживание.

DIPLOMAT-DENTAL на протяжении уже многих лет добивается успеха на международном стоматологическом рынке, предлагая идеальное сочетание качественной разработки, производства и обслуживания продукции.

DIPLOMAT DENTAL - ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ЦВЕТНОЙ СТЕКЛЯННЫЙ ДИСПЛЕЙ

Все установки премиальной линии оборудованы 7" цветным стеклянным дисплеем с поддержкой нескольких языков, что позволяет пользователю легко и удобно устанавливать параметры настроек. Приятно дотрагиваться, легко очищать, видеть четкую картинку – вот главные достоинства этой передовой технологии. Дисплей предоставляет возможность выполнить точную настройку кресла и всех инструментов. Четыре разных пользователя могут установить свои персональные параметры для каждого инструмента в девяти разных программах под своими именами. Педаль, также доступная в беспроводной версии, благодаря наличию программируемых кнопок, позволит сохранить наиболее часто используемые вами функции. Интерфейс USB может быть использован для отображения рентгеновских снимков (в форматах .bmp или .jpg с максимальным разрешением 800x480). Светильник Xenos LED может управляться с 4 различных мест установки (блоки стоматолога и ассистента, сенсор, ножное управление). Новый дисплей оборудован запрограммированными положениями кресла: ноль, плевательница, положение Trendelenburg и предыдущая позиция. Дополнительно в установках премиальной линии на стороне ассистента также может быть смонтирован стеклянный дисплей для удобства работы ассистента.

ВЫСОКАЯ ПОДВИЖНОСТЬ КРЕСЛА

Модели премиальной линии DA370/DA380 оборудованы тремя электрическими моторами внутри кресла. Благодаря этой усовершенствованной технологии и особенностям движения кресла хирургу очень легко точно позиционировать пациента. Это преимущество особенно необходимо при работе с рентгеном или микроскопом.

6 ДО 6 ИНСТРУМЕНТОВ НА БЛОКЕ ВРАЧА

Все установки Классической линии и линии «Комфорт» могут быть оборудованы 5 инструментами. На установках Премиальной линии можно разместить до 6 инструментов, что позволяет стоматологу иметь под рукой все необходимое для работы в полной готовности. Расположение каждого инструмента может быть адаптировано под требования конкретного пользователя (это необходимо определять на стадии заказа).



ГИГИЕНА И ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Все установки Diplomat имеют автоклавируемые силиконовые накладки, рукоятки и чашу плевательницы. В установках Классической линии и «Комфорт» для поддержания водопроводящих каналов чистыми заказчику предлагается обычная ручная система дезинфекции. Дополнительно установки линий «Комфорт» и «Премиум» могут быть оборудованы полностью автоматической модернизированной системой дезинфекции и обеззараживания. На все установки Diplomat нанесено полиуретановое покрытие, которое превосходно защищает от инфекций и позволяет пользователям легко проводить очистку и обслуживание.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Во всех установках Diplomat при производстве используются только надежные материалы: алюминий, полиуретан, сталь. Почти все части покрашены полиуретановой краской, благодаря чему установка имеет эффектный внешний вид и может надежно противостоять воздействию УФ-излучения.



НОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Никаких проводов на полу! Модели линий «Премиум» и «Комфорт» могут быть оборудованы беспроводным многофункциональным ножным управлением, полностью программируемым пользователем с помощью интерфейса 7" цветного дисплея. Батарейки педали хватает на 2-3 месяца работы без подзарядки.* Пользователь может наслаждаться работой, не ограничивая своих движений возле установки. * исходя из стандартного 8-часового рабочего дня

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА В ЛИНИИ КОМФОРТ

Все установки линии «Комфорт» оснащены 7" цветным сенсорным дисплеем, который позволяет произвести детальную настройку кресла и всех инструментов. Четыре разных пользователя могут установить собственные параметры для каждого инструмента в девяти разных программах под своими именами. Также ножное управление имеет программируемые кнопки, которые позволяют выбирать наиболее часто используемые вами функции. Интерфейс USB может быть использован для отображения на экране рентген-снимков (в форматах .bmp или .jpg с максимальным разрешением 800x480). Светильник Xenos LED может управляться с четырех разных мест установки (блоки стоматолога и ассистента, сенсор, ножное управление). На новом дисплее запрограммированы следующие положения кресла: ноль, плевательница, Trendelenburg, предыдущая позиция.



Удовлетворенность пользователя является нашим базовым принципом. Установки обладают следующими достоинствами:

3 ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ

Мы предлагаем нашим заказчикам 3 варианта исполнения установок

- установка с креплением на кресле – наиболее распространенная в мире
- стационарная система – больше места для персонала и легкий гигиенический уход. Грузоподъемность кресла = 200 кг
- мобильная версия – удобная для операционных кабинетов, где важна гибкость позиционирования

УСТАНОВКА
НЕСЕННАЯ
КРЕСЛОМ



СТАЦИОНАРНАЯ
СИСТЕМА



МОБИЛЬНАЯ
ВЕРСИЯ




ИДЕАЛЬНАЯ ЭРГОНОМИКА

Если необходимо больше места возле пациента, навесные версии установок линий «Премиум» и «Комфорт» оборудованы сдвигаемой плевательницей, что позволяет создать дополнительное пространство вокруг кресла для проведения хирургических манипуляций. Дополнительно установки можно оснастить электрической системой поворотачаши и столиком ассистента на пантографическом плече для улучшения эргономики во время лечения. Подголовник 3D позволяет добиться точного позиционирования во всех направлениях. Передвижной подлокотник может двигаться в двух направлениях для облегчения доступа к креслу пациента. Все кресла имеют интегрированную систему «антираздевания» пациента.



ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

Некоторые модели установок линий «Премиум» и «Комфорт» приспособлены для монтажа такого оборудования, как, например, рентген, микроскоп или перистальтическая помпа в комбинации с имплантологическим микромотором.

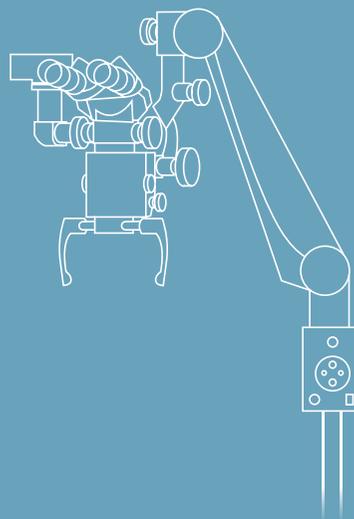

УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И ЦВЕТОВАЯ СХЕМА

На всех установках Diplomat доступна обивка в 47 различных цветах. Керамическая чаша плевательницы также может быть окрашена во многие из этих цветов. Благодаря продвинутой технологии окраски, у нас есть возможность создавать разные цветовые схемы, исходя из пожеланий заказчика, что в сочетании с уникальным дизайном делает установки DIPLOMAT произведением искусства. Здесь, в Diplomat, мы осуществляем мечты заказчика. У нас есть возможность предложить определенные решения, если они технически возможны и соответствуют правовым нормам. Таким образом, ваша стоматологическая установка может выглядеть именно так, как вы мечтаете.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Так как нам не все равно, все установки Diplomat оборудованы системой выключения, которая предотвращает несчастные случаи и иные неприятные ситуации с пациентом и персоналом.



ОБОРУДОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Мы можем учесть различные пожелания врача и изготовить стоматологическую установку в соответствии с его желаниями, если это не входит в противоречие с техническими возможностями.

ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ



УСТАНОВКИ ПРЕМИАЛЬНОЙ ЛИНИИ с наиболее совершенной технологией являются шедевром Diplomat. Они открывают новые горизонты с точки зрения удовлетворения потребностей врача-стоматолога. Благодаря плавным линиям и усовершенствованному интерфейсу стеклянного дисплея, эргономичности и функциональности каждый стоматолог получает не имеющий аналогов опыт работы. Наша цель – создать лучшую стоматологическую установку – стала реальностью. Добро пожаловать в будущее.

КОМФОРТ ЛИНИЯ



УСТАНОВКИ ЛИНИИ «КОМФОРТ» со встроенной передовой электроникой полностью удовлетворяют запросы требовательных пользователей. Они позволяют упростить ежедневную рутинную работу и превратить ее в удовольствие при использовании данного оборудования. В сочетании с превосходной эргономичностью и дизайном новая установка линии «Комфорт» станет украшением вашего кабинета.

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ



УСТАНОВКИ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИНИИ с простой, надежно сконструированной и современной компактной электроникой соответствует всем стандартам стоматологического лечения. Легкая конструкция, простая эксплуатация, широкий список опций – таковы очевидные достоинства среди остальных преимуществ этих моделей DIPLOMAT. «Трудяга» – вот отличная характеристика установок классической линии, простота и надежность которых обеспечат стоматологу комфортную работу на долгое время.

ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

DA370/DA380
DIPLOMAT ADEPT

DC350/DL320
DIPLOMAT CONSUL / LUX



DA370 / DA380

DIPLOMAT ADEPT



МАКСИМУМ КОМФОРТА, ВЫДАЮЩАЯСЯ ЭРГОНОМИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установки DA370 (верхняя подача инструментов) и DA380 (нижняя подача инструментов) обеспечивают исключительный комфорт для вас и ваших пациентов. Сочетая современную эргономику и прогрессивный дизайн, DA370 и DA380 являются синтезом функциональности и комфорта.

Инновационный интерфейс:
**НОВЫЙ 7" ЦВЕТНОЙ СТЕКЛЯН-
НЫЙ ДИСПЛЕЙ!**



РАБОЧЕЕ
ПРОСТРАНСТВО

Эргономичный дизайн
установки обеспечивает
легкий и комфортный
доступ к пациенту.



НОВЫЙ ВСТРОЕННЫЙ
МИКРОСКОП
В УСТАНОВКАХ
ПРЕМИАЛЬНОЙ
ЛИНИИ
DENSIM OPTICS



• **ГИБКОСТЬ**

Положение шести инструмен-
тов на столике врача
адаптируется под
требования стоматолога.



• **ОПТИМАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА**

Стул стоматолога с регулируемой
спинкой и опциональным подде-
рживающим кольцом для ног.



• **ВЫСОКАЯ ПОДВИЖНОСТЬ**

Передовая технология переме-
щения кресла с грузоподъемно-
стью до 200 кг.



• **ИДЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ГОЛОВЫ**

3D подголовник обеспечивает
позиционирование по 3 осям.

☆ **ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО**

При производстве установок используются
только высококачественные материалы
(алюминий, сталь, полиуретан), чтобы
увеличить срок службы и противостоять
действию УФ-излучения, сохраняя
установки в идеальной форме.

• **ДО 6 ИНСТРУМЕНТОВ**

Блок ассистента
на пантографическом плече
с возможностью установки
до 6 инструментов.



DC350 / DL320

DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT LUX

АДАПТИРУЙТЕ УСТАНОВКИ ПОД СВОИ ТРЕБОВАНИЯ

Обе установки могут быть полностью адаптированы под ваши нужды и предпочтения. Они могут быть оборудованы десятью инструментами наряду со слюноотсосом: 6 на блоке врача и 4 на столике ассистента. Также имеется эргономичный трей-столик (нержавеющая сталь или пластик), позволяющий стоматологу держать все необходимые инструменты и материалы под рукой. Врачи-стоматологи и их пациенты в полной мере оценят модернизированную версию гидроблока с автоматической или ручной системой управления съемной поворотной плевательницей. Гидроблок полностью совместим с сухой аспирационной системой Cattani, сепараторами амальгамы Durr и Metasys, а также с системами влажной аспирации с клапанами Durr.



• ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ РЕНТГЕН-СНИМКОВ

Интегрированный USB-интерфейс для просмотра рентген-снимков на 7" цветном стеклянном дисплее (в форматах .bmp или .jpg с максимальным разрешением 800x480).

• ОПТИМАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Стул ассистента с регулируемой спинкой и опциональным поддерживающим кольцом для ног.

• ПЛАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Электропневматический тормоз.

• ИДЕАЛЬНАЯ ЭРГОНОМИКА

Стандартная или широкая спинка кресла для комфорта и удобного доступа к пациенту.

• ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Максимальная грузоподъемность кресла 235 кг (с учетом веса установки).

• МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В качестве опции доступны полностью автоматизированная или ручная система дезинфекции и сепаратор амальгамы Электрическая поворотная керамическая плевательница доступна в различных цветах.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Поворотная плевательница для лучшей эргономики и обеспечения дополнительного пространства возле пациента.

• УПРАВЛЕНИЕ С КЛАВИАТУРЫ


Управление с клавиатуры на блоке ассистента с пантографическим плечом и опциональным пневматическим тормозом.



Мобильная версия доступна для моделей DL320, DA380, DL210, DA280.



Система нижней подачи инструментов для модели DL320.

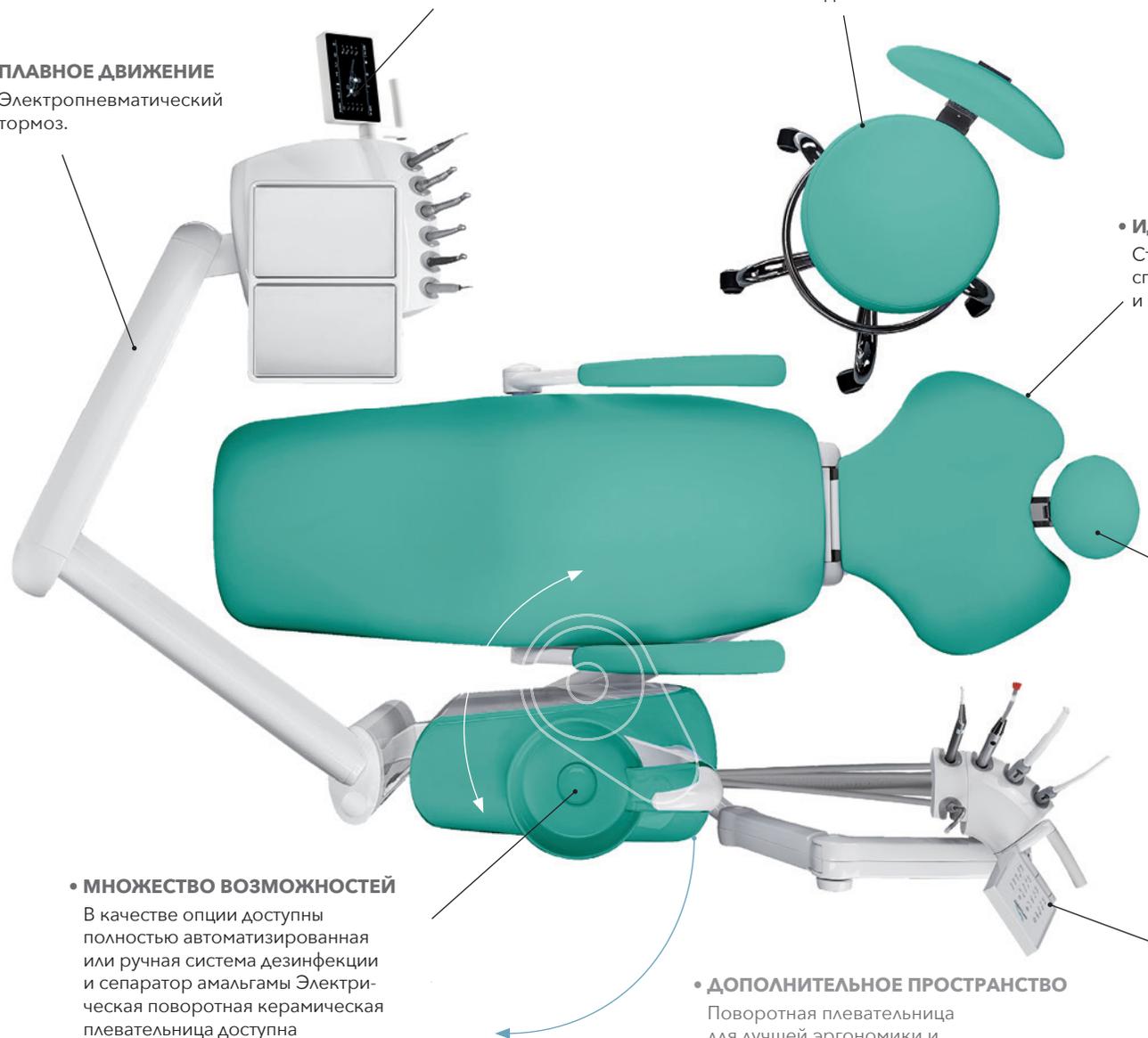



В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАШИХ ЛИЧНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ В УСТАНОВКУ МОЖНО ЛЕГКО ИНТЕГРИРОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.

Dr. Miroslava Andrasovicova / Врач-стоматолог



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ГИГИЕНЫ

Работа автоматизированной системы гигиены состоит из двух отдельных процессов: дезинфекция водопроводящих каналов инструментов, линий наполнения и смыва чаши плевательницы, а также деконтаминация аспирационной системы и шлангов для обеспечения безопасности, чистоты и эффективности использования установки.



СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ МИКРОСКОП DENSIM OPTICS

Тот случай, когда компетентность и точность имеют значение. Стоматологический микроскоп может быть встроен в установки Diplomat для выполнения высокоточных работ.



БЕСПРОВОДНОЕ НОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Никаких проводов на полу! Модели линий «Премиум» и «Комфорт» могут быть оборудованы беспроводным многофункциональным ножным управлением, полностью программируемым пользователем с помощью интерфейса 7" цветного дисплея. Цикл работы батарейки составляет 2-3 месяца без подзарядки*. Пользователь может наслаждаться работой, не ограничивая своих движений возле установки.

* исходя из стандартного 8-часового рабочего дня

A close-up photograph of a car seat's headrest and backrest. The seat is upholstered in a light-colored, textured material, possibly leather or a high-quality fabric. The headrest is on the left, and the backrest is on the right. The lighting is soft, highlighting the contours and texture of the seat. The background is a plain, light color.

КОМФОРТ ЛИНИЯ

DA270 / DA280
DIPLOMAT ADEPT

DC310 / DL210
DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT LUX

DA270 / DA280

DIPLOMAT ADEPT



СТАНЬТЕ БЛИЖЕ К СВОИМ ПАЦИЕНТАМ

Стационарные установки Diplomat Adept DA270 (верхняя подача инструментов) и DA280 (нижняя подача инструментов) выполнены с боковым креплением кресла на гидроблоке. Два встроенных приводных механизма позволяют легко менять положение кресла и угол наклона спинки. С блока врача и ассистента, а также с помощью педали можно легко управлять движением кресла. Наши инженеры подумали и о безопасности: встроенные защитные механизмы предотвращают кресло от поломки. Обе установки по запросу могут быть оборудованы стоматологическим монитором.

Система нижней подачи инструментов для моделей DA280 и DL210.




Бестеневой светильник XENON для оптимального освещения управляется с четырех разных мест установки. (блоки стоматолога и ассистента, сенсор, ножное управление)

• **УДОБСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ**

7" цветной дисплей с дружелюбным интерфейсом и поддержкой нескольких языков.

• **ДИЗАЙН В СОЧЕТАНИИ С ЭРГОНОМИКОЙ**

Уникальный дизайн с 47 доступными цветовыми гаммами.

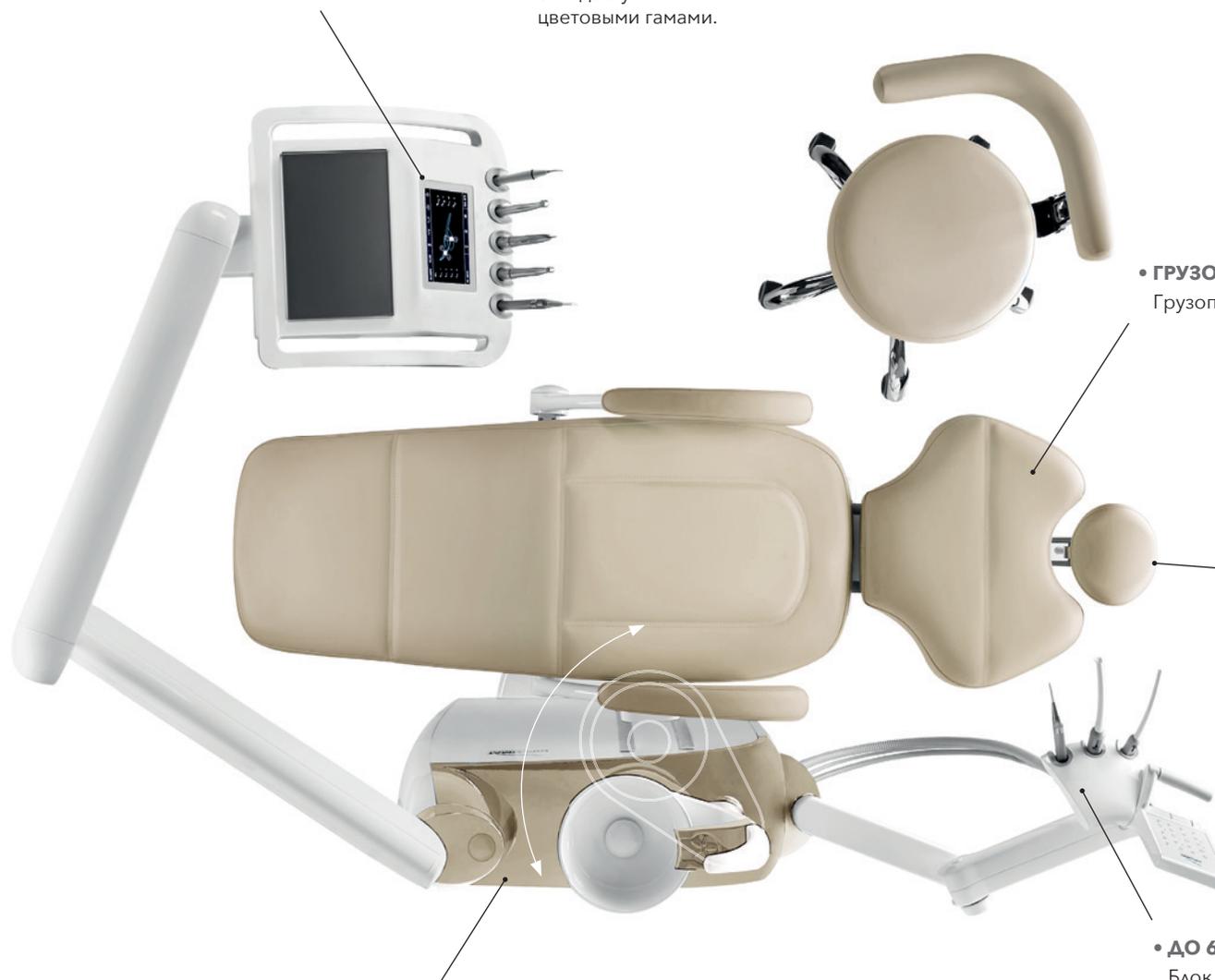

• **ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ**

Грузоподъемность до 200 кг.



• **ЛУЧШИЙ КОМФОРТ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ**

3D подголовник обеспечивает позиционирование по 3 осям.

• **ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ**

Позволяет встроить рентген, стоматологический микроскоп, перистальтическую помпу в комбинации с имплантологическим микро мотором.

• **ДО 6 ИНСТРУМЕНТОВ**

Блок ассистента на пантографическом плече с механическим или пневматическим тормозом и возможностью установки до 6 инструментов.

DC310 / DL210

DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT LUX

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШИХ НУЖД ПО ИДЕАЛЬНОЙ ЦЕНЕ

Установки DC310 (верхняя подача инструментов) и DL210 (нижняя подача инструментов) доступны в версии с фиксацией на кресле пациента и в мобильном варианте. На навесных установках пантографическое плечо оборудовано механическим или электропневматическим тормозом, что позволяет установить блок врача в оптимальном рабочем положении. Управление поворотной плетательницей осуществляется с помощью электроники с блока врача или ассистента. Положение блока ассистента на пантографическом плече можно регулировать по высоте. Ассистент может управлять выбранными функциями с помощью мембранной клавиатуры.





На всех установках Diplomat Dental можно смонтировать медицинский монитор 17" или 22".



ДЛЯ ЛУЧШЕЙ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ
С КАМЕРОЙ
DIPLOMAT




Интраоральная камера Diplomat с высоким качеством изображений совместно с медицинским монитором создают идеальную систему визуализации для лучшего взаимодействия стоматолога и пациента.

• ОПТИМАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

Модуль стоматолога с уникальным дизайном, рассчитанный на 5 инструментов с возможностью их индивидуального расположения (под заказ).

• УЛУЧШЕННЫЙ ДОСТУП

Подлокотник может двигаться в двух направлениях для обеспечения лучшего доступа.

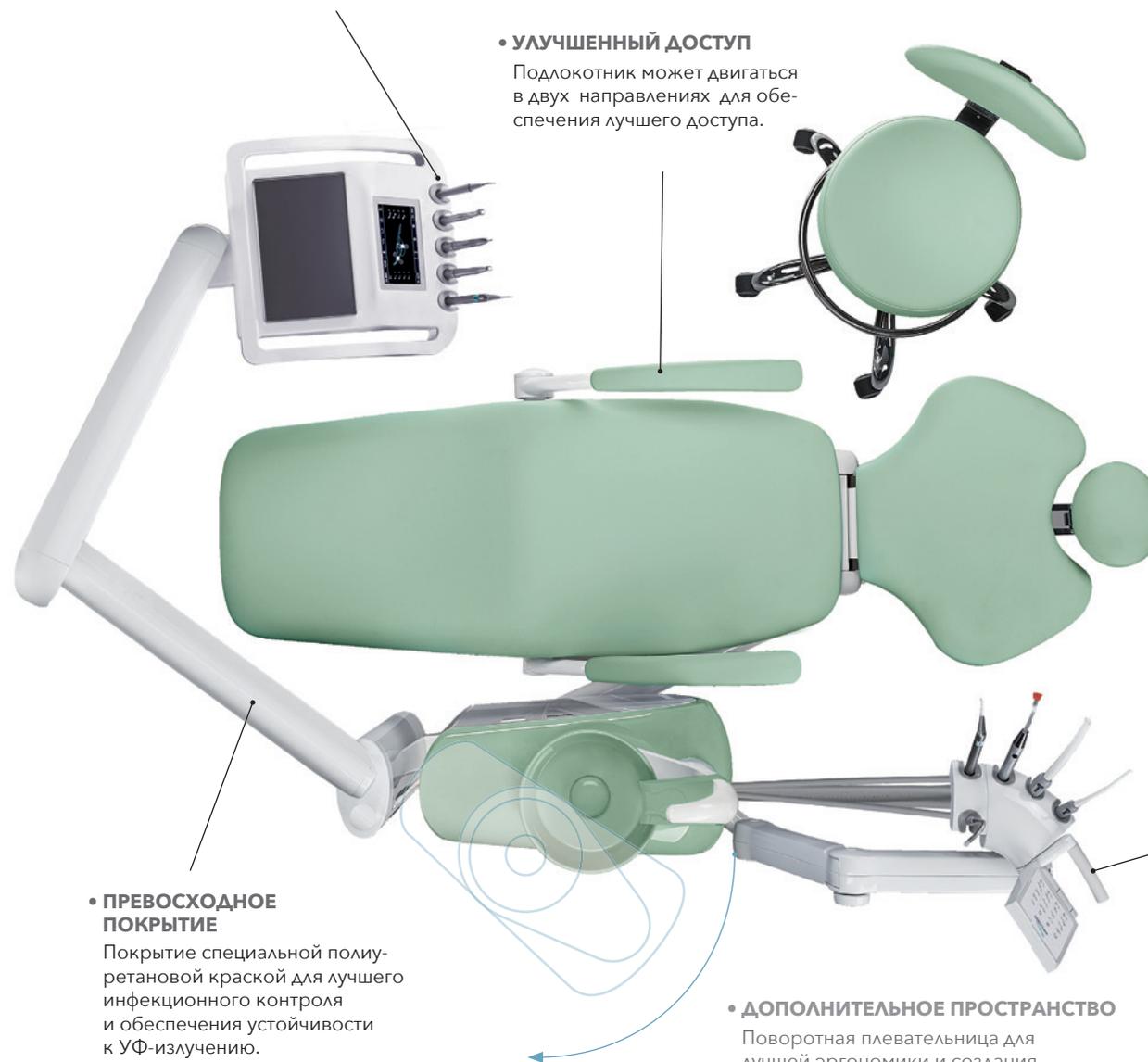

• ПРЕВОСХОДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Покрытие специальной полиуретановой краской для лучшего инфекционного контроля и обеспечения устойчивости к УФ-излучению.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Поворотная плевательница для лучшей эргономики и создания дополнительного пространства возле пациента.

• ЦВЕТА

Бесшовная или простроченная мягкая, удобная и эффектная обивка доступна в 47 различных цветах.

• ИДЕАЛЬНАЯ ЭРГНОМИКА

Стандартная или широкая спинка кресла для идеального доступа и обеспечения комфорта пациенту.

• МАКСИМАЛЬНАЯ ГИГИЕНА


Съемные и стерилизуемые силиконовые рукоятки на пантографическом плече плече блока ассистента/стоматолога, светильнике и силиконовые накладки на модуле стоматолога.



DIPLOMAT-DENTAL ИМЕЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, КОТОРОЕ БЫЛО РАЗРАБОТАНО НА СНОВАНИИ БОГАТОГО ОПЫТА РАБОТЫ В СФЕРЕ СТОМАТОЛОГИИ.

Dr. Zbynek Vrba / Врач-стоматолог

Поворотная плевательница для лучшей эргономики и создания дополнительного пространства возле пациента

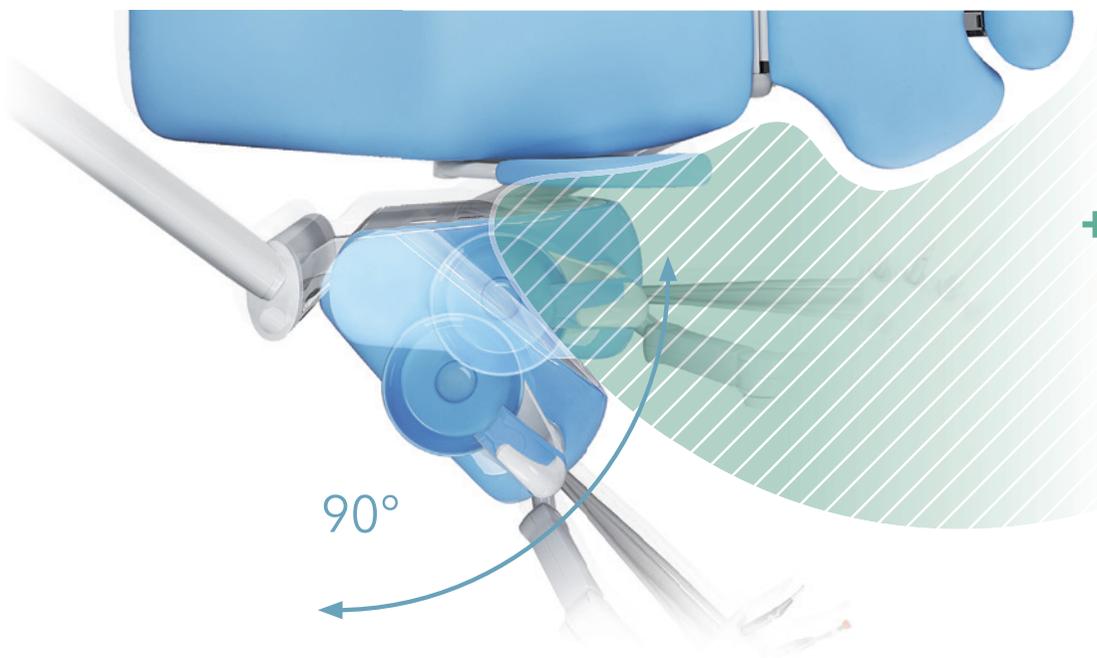

**+ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
СВОБОДА
ДВИЖЕНИЙ**

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

DC170 / DC180
DIPLOMAT CONSUL

DA170 / DA130
DIPLOMAT ADEPT

DA110A
DIPLOMAT ADEPT

DC170 / DC180

DIPLOMAT CONSUL




ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Установки DC170 (верхняя подача инструментов) и DC180 (нижняя подача инструментов) относятся к категории «с креплением на кресле». Эти модели оснащены блоком врача на 5 инструментов и модулем ассистента на 6 инструментов. Простой и надежный дизайн с современной компактной электроникой позволяет выполнять все виды стандартных стоматологических вмешательств. Легкая конструкция, простота очистки и ухода, широкий спектр инструментов являются очевидными достоинствами данных моделей DIPLOMAT.

Система нижней подачи инструментов для моделей DC180 и DA130.



Роскошная мягкая и удобная обивка кресел DIPLOMAT.

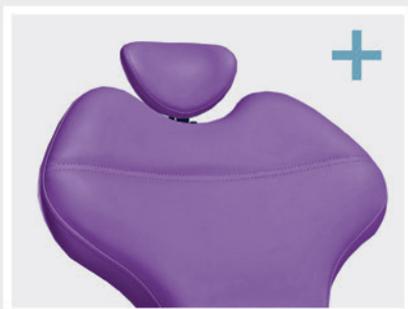

• **ПРЕВОСХОДНОЕ ПОКРЫТИЕ**

Покрытие специальной полиуретановой краской для лучшего инфекционного контроля и обеспечения устойчивости к УФ-излучению.

• **ЛЕГКАЯ НАВИГАЦИЯ**

Модуль стоматолога на 5 инструментов с интуитивно понятной и простой клавиатурой для легкой навигации.

• **КОМФОРТАБЕЛЬНОЕ КРЕСЛО**

Плавное движение кресла со встроенной системой «антираздевания» пациента.

• **ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ**

Максимальная грузоподъемность кресла 235 кг (с учетом веса установки).

• **ТОЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПОДГОЛОВНИКА**


Возможно позиционирование подголовника по 2 или 3 осям.

• **СИСТЕМА ДЕЗИНФЕКЦИИ**

Доступны ручная система дезинфекции и сепаратор амальгамы.

• **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОВОРОТА**

Поворотная чаша плевательницы для версий Consul или LUX.

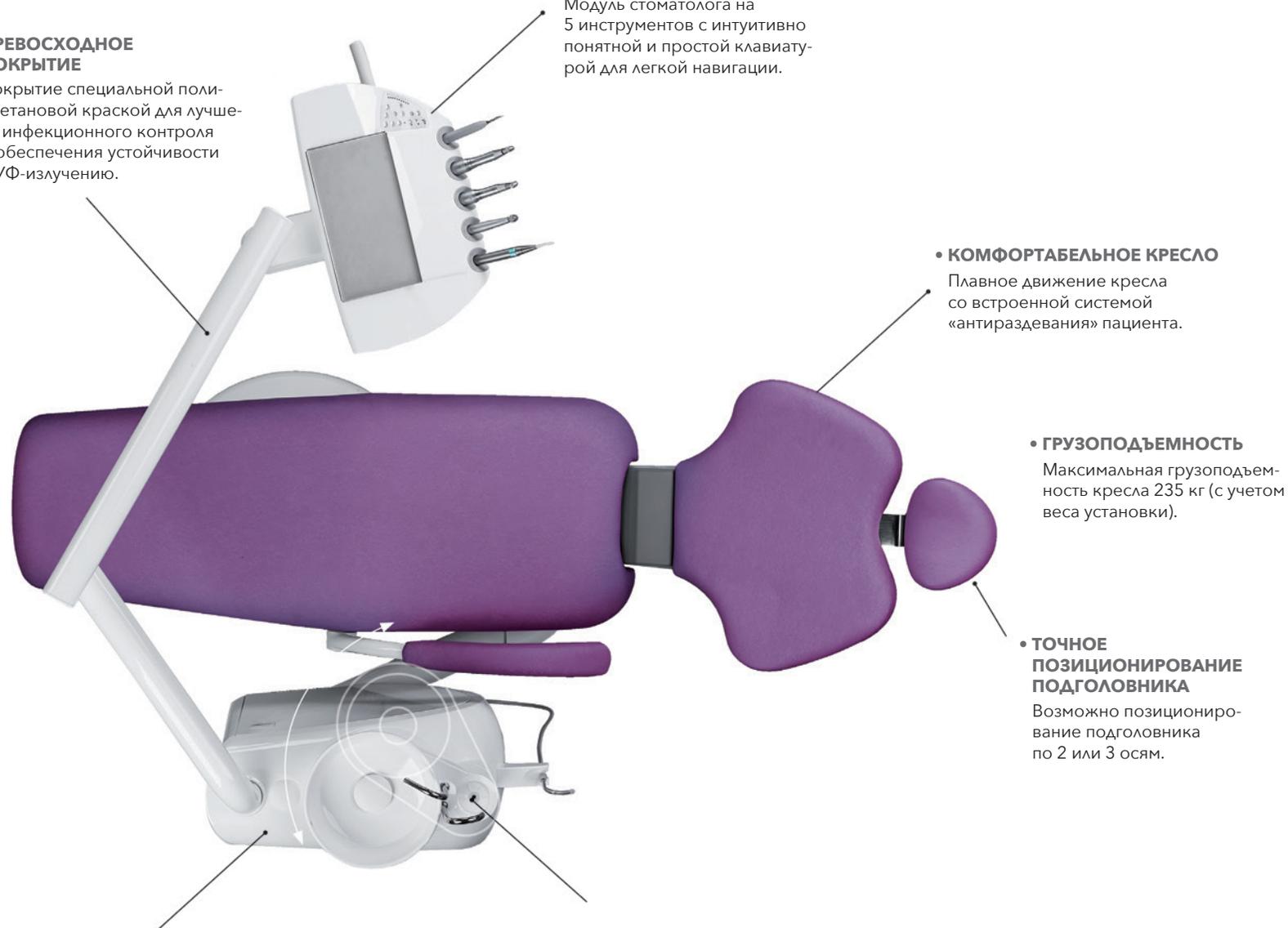

DA170 / DA130

DIPLOMAT ADEPT

СТАЦИОНАРНЫЕ УСТАНОВКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Новые версии установок DA130 (нижняя подача инструментов) и DA170 (верхняя подача инструментов) выполнены с боковым креплением кресла на гидроблоке. Передовая технология механизма движения кресла гарантирует его эффективное перемещение по вертикали, создавая дополнительный рабочий комфорт для стоматолога и ассистента. Оригинальный дизайн Diplomat обуславливает превосходную эргономику и надежность и, несомненно, соответствует ожиданиям самых требовательных стоматологов. Установки поставляются с креслом, имеющим 5 программируемых положений для 2 различных пользователей. Обе установки могут быть оборудованы поворотной или фиксированной плевательницей в зависимости от потребностей заказчика.





ЗАЩИТНАЯ ПОДУШКА



ДЕТСКОЕ СИДЕНЬЕ

Защитная подушка и детское сиденье доступны для всех кресел Diplomat.



Модуль ассистента

Пленочная клавиатура для управления креслом, смыв плевательницы и наполнение стакана доступны на всех установках классической линии.

• **СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПЛЕЧО**

Сбалансированное плечо столика врача для комфортной работы.

• **УЛУЧШЕННЫЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС**

5 инструментов на блоке врача с возможностью их индивидуального расположения (под заказ).

• **БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА**

Удобство работы стоматолога за счет дополнительного пространства под креслом для ног.

• **ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ**

Грузоподъемность кресла до 200 кг.

• **ОБИВКА**

Бесшовная или простроченная мягкая, удобная и эффектная обивка доступна в 47 различных цветах.

• **МЕНЬШЕ, НО ЛУЧШЕ**


Компактный дизайн стоматологической установки отлично подойдет для маленьких кабинетов.

★ **ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО**

При производстве установок используются только высококачественные материалы (алюминий, сталь, полиуретан), чтобы увеличить срок службы и противостоять действию УФ-излучения, сохраняя установки в идеальной форме.

• **ДО 6 ИНСТРУМЕНТОВ**

На модуле ассистента с опциональной клавиатурой может быть смонтировано до 6 инструментов.

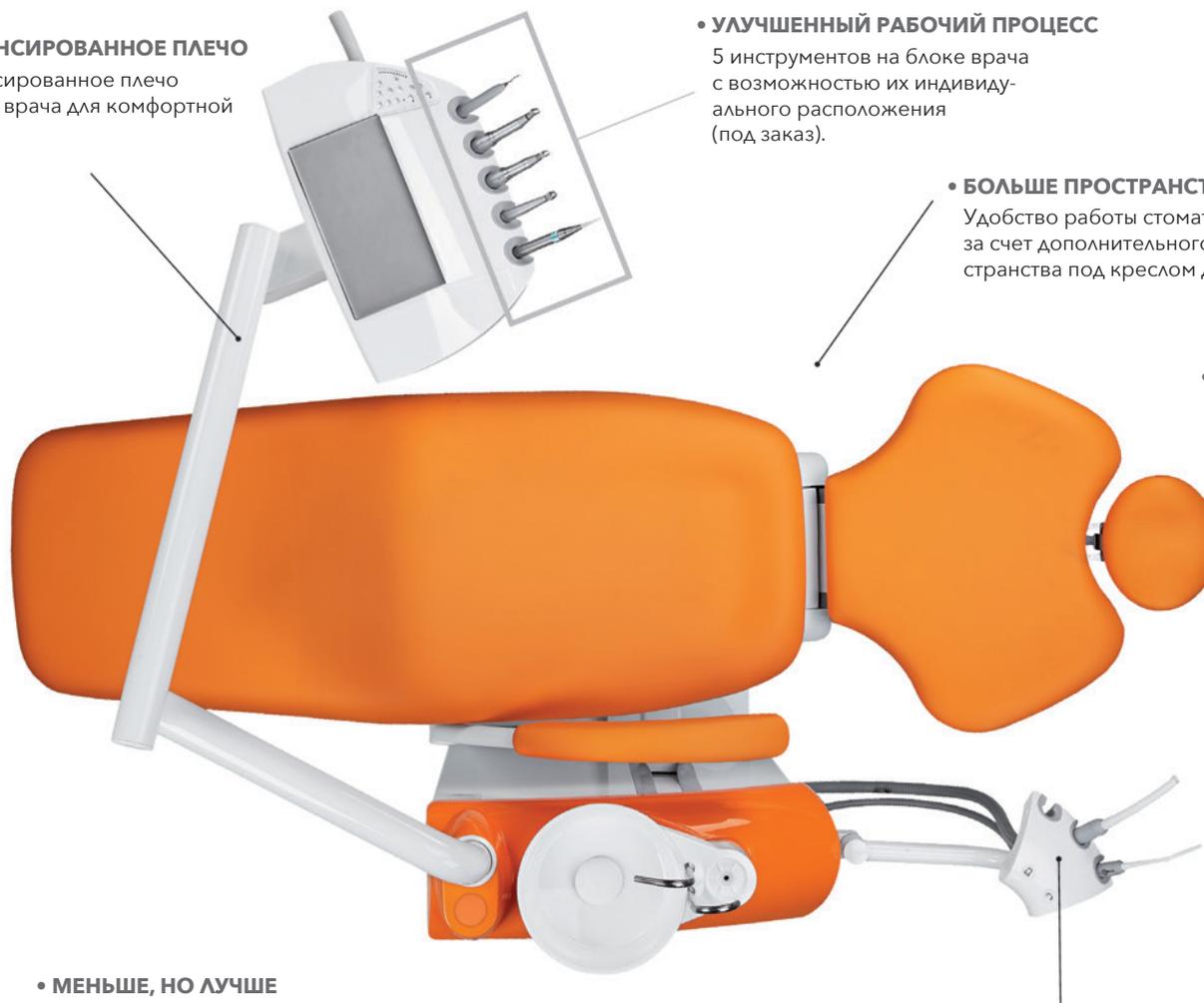

DC170

ORTHODONTICS

DIPLOMAT CONSUL



Для выполнения ортодонтических работ стоматологу нужны хороший обзор панели управления и боковой столик подходящего размера, чтобы все необходимые инструменты и материалы находились в пределах досягаемости. Поэтому стоматологическая установка DC170 Orthodontics с креплением на кресле была разработана специально для ортодонтических вмешательств.

DA110A

DIPLOMAT ADEPT



Стоматологическая установка Diplomat Adept DA110A является улучшенной версией модели DA110. Эта установка выполнена в стационарном варианте, на врачебном блоке может быть установлено до 5 инструментов с нижней или верхней подачей. Модуль врача смонтирован на поворотном пантографическом плече. Стоматолог может удобно управлять всеми функциями с клавиатуры на панели управления или с помощью педали. Установка оборудована снимающейся стерилизуемой чашей плевательницы. По запросу может быть установлен негатоскоп. Таким образом, DA110A является исключительно надежной и функциональной установкой по разумной цене.

D10L

СТУЛЬЯ ВРАЧА DIPLOMAT



Стулья врача-стоматолога D10L, в том числе стул-седло, были разработаны с тем, чтобы обеспечить комфортное положение тела для врача и ассистента. Новая модифицированная конструкция помогает им сохранять правильную эргономичную посадку, также и при работе с микроскопом. Обивка доступна в широком спектре цветов, что позволяет пользователям создавать уникальный интерьер в своих кабинетах. Все стулья D10L могут поставляться с поддерживающим кольцом для ног.

КОМПРЕССОРЫ

	Воздухосборник	Производительность @ 5 бар	Максимальное давление	Потребляемая мощность	Уровень шума	Габариты	Габариты с кожухом
KD 109	9 л	60 л/мин.	7 бар	930 Вт	70 дБ	370x480x360	
KD 109B	9 л	60 л/мин.	7 бар	930 Вт	58 дБ		460x550x430
KD 124	24 л	60 л/мин.	7 бар	930 Вт	70 дБ	450x450x650	
KD 124B	24 л	60 л/мин.	7 бар	930 Вт	58 дБ		630x770x820
KD 224	24 л	100 л/мин.	7 бар	1,25 кВт	72 дБ	450x450x650	
KD 224B	24 л	100 л/мин.	7 бар	1,25 кВт	62 дБ		630x770x820
KD 224D	24 л	100 л/мин.	7 бар	1,25 кВт	72 дБ	450x600x700	
KD 224DB	24 л	100 л/мин.	7 бар	1,25 кВт	62 дБ		630x770x820
KD 124AB*	24 л	60 л/мин.	7 бар	930 Вт	58 дБ		560x640x1270
KD 224AB*	24 л	100 л/мин.	7 бар	1,25 кВт	62 дБ		560x640x1270



Чтобы удовлетворить разнообразные требования наших клиентов, мы предлагаем широкий спектр дополнительного оборудования, которое разработано на основе многолетнего опыта.





«Мы производим качество»



DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany
Slovak republic

T 00421 33 79 54 111
F 00421 33 77 26 326

info@diplomat-dental.com
www.diplomat-dental.com



EUR-MED SLOVAKIA, s.r.o.
Športová 503, 916 01 Stará Turá
Slovak republic

Office
Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany
Slovak republic

T 00421 33 79 54 820-5
F 00421 33 79 54 809

cis@eur-med.sk
www.eur-med.sk

дилер: