




Стоматологические установки

Из чего состоит стоматологическая установка

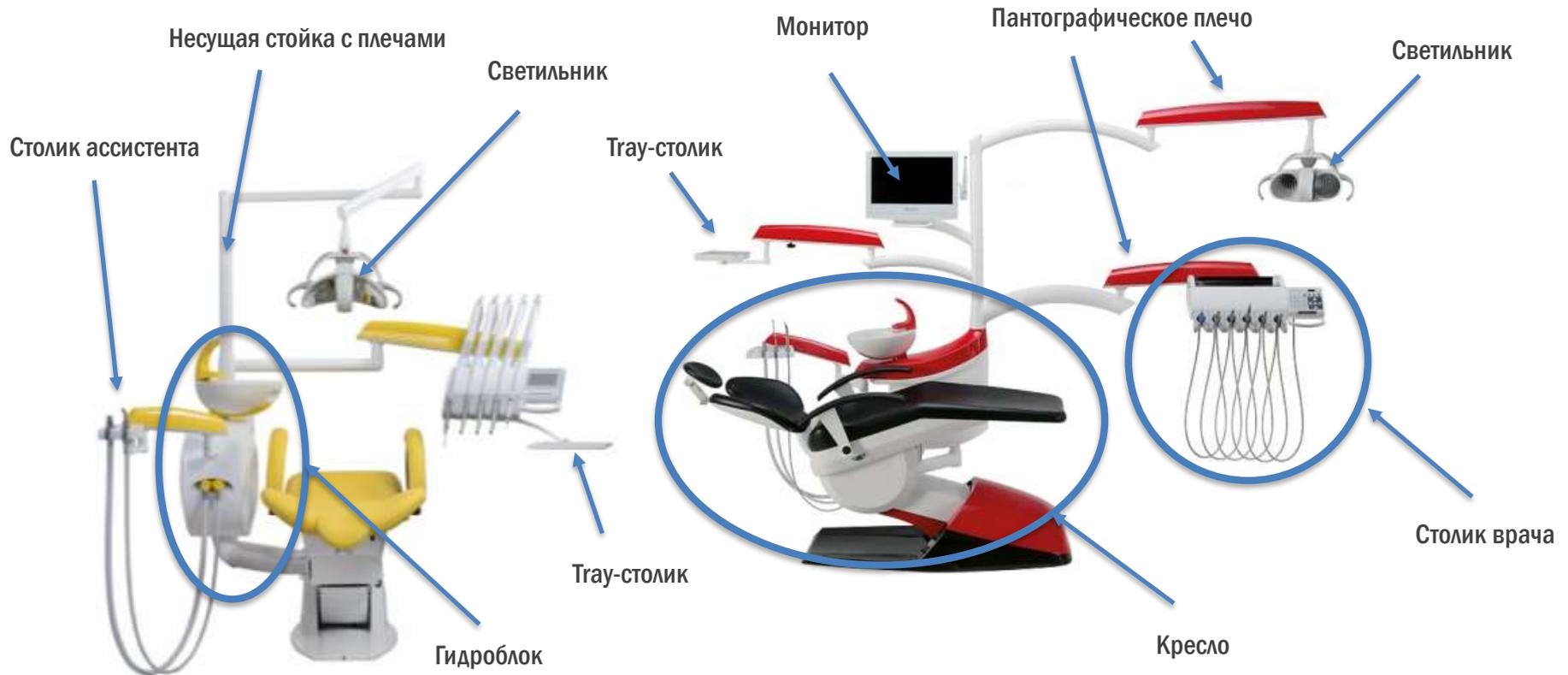

Способы подключения инструмента



Верхнее подключение


- + Безопасность инструмента
- Инструмент находится в напряжении




Нижнее подключение

- + Инструмент в свободном состоянии
- Вероятность повреждения упавшего инструмента

Клавиатура столика врача

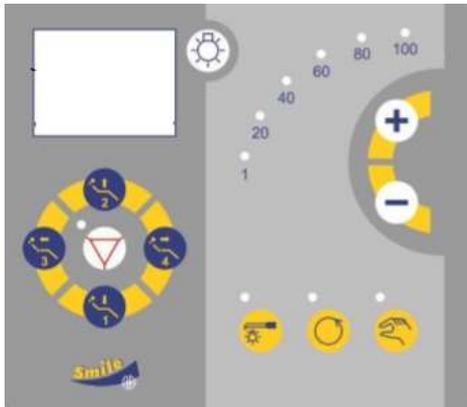

Smile
11 кнопок
Негатоскоп

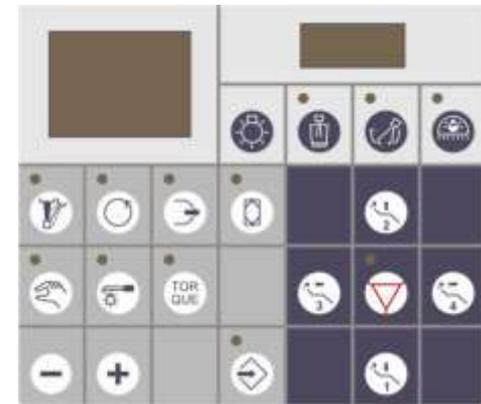


EFFECTIVE
19 кнопок
Негатоскоп





EASY
LIFT
18 кнопок
Негатоскоп


Touch-screen - опция

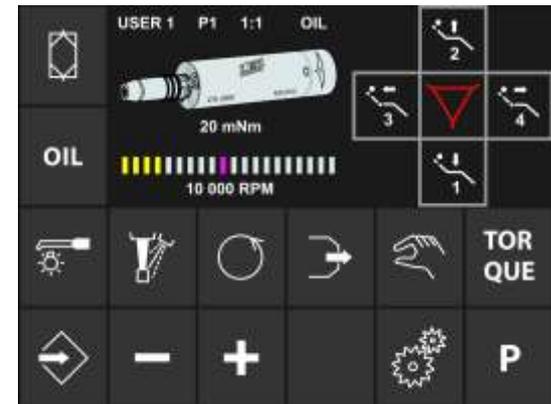


Клавиатура столика врача

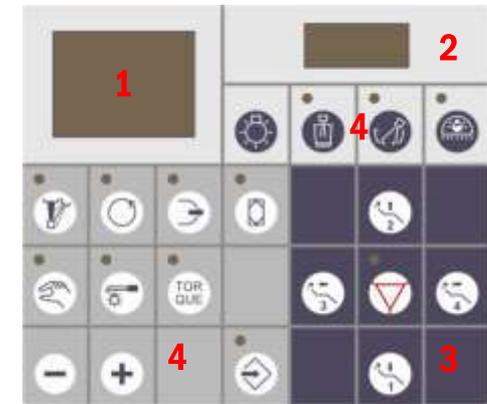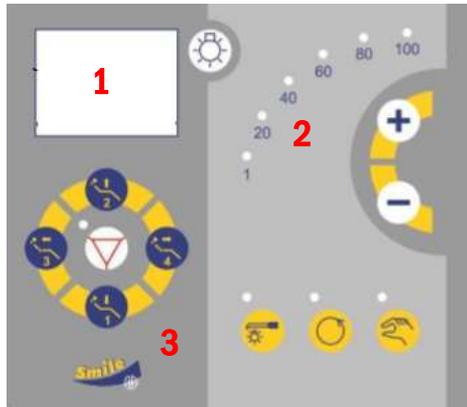

1. Негатоскоп
2. Шкала скорости вращения
3. Управление креслом
4. Управление установкой

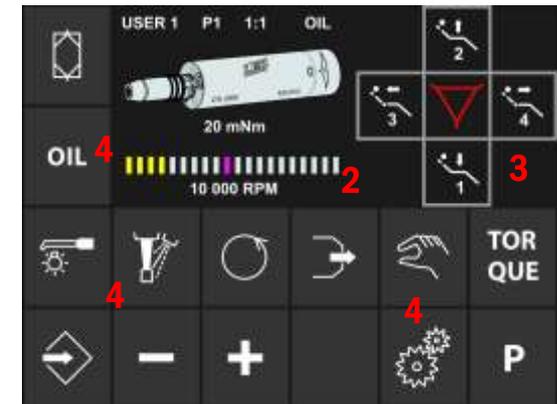

Система отсасывания (Chirana – только сухое отсасывание)

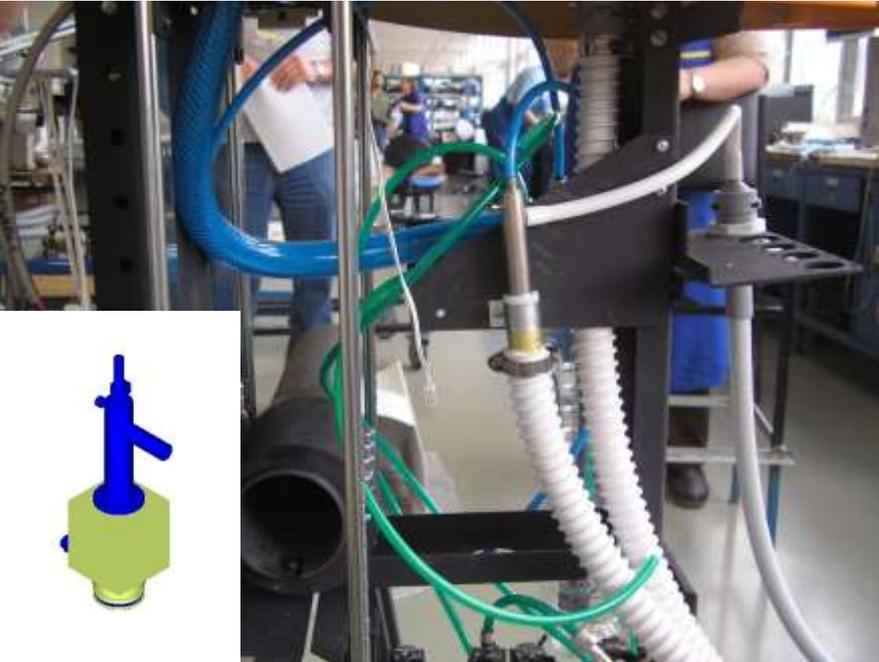

Воздушный эжектор


- + Низкая цена
- + Простота конструкции
- Ограниченная производительность



Система CATTANI

- + Повышенная производительность
- Необходимость наличия внешней помпы

Механическое управление гидроблоком

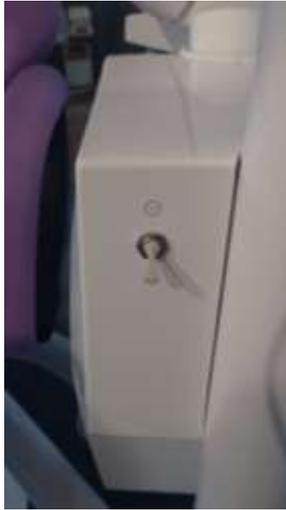

**Переключение
Автономный/центральный
источник воды**

**Включение слюноотсоса
Управление смывом чаши
Наполнением стакана**



Электронное управление гидроблоком




**Включение/выключение
смыва плевательницы**




**Включение/выключение
наполнения стакана**

Система отсасывания всегда комплектуется слюноотсосом

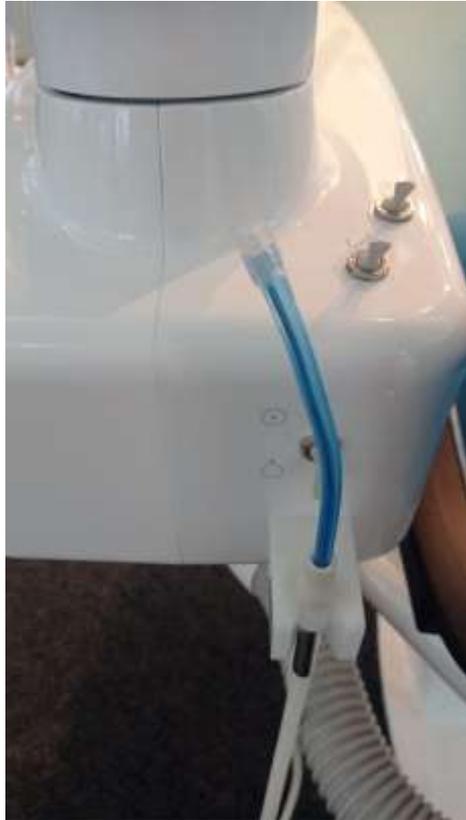

Smile

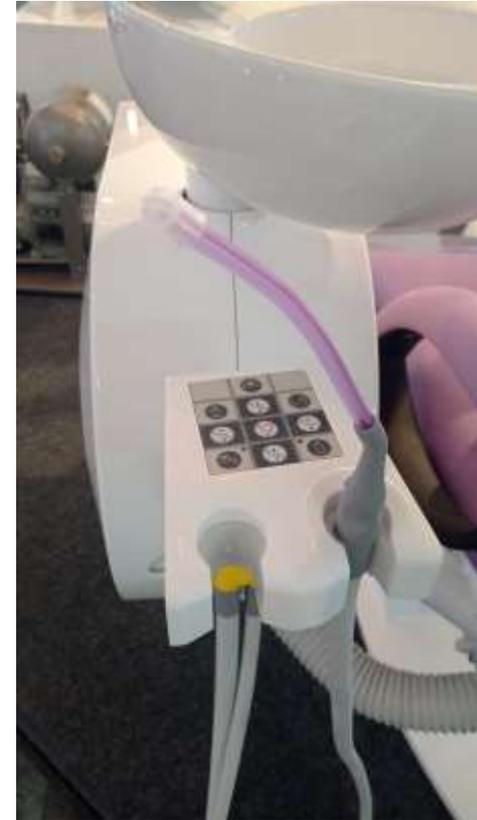

**EASY
LIFT
EFFECTIVE**

Плевательница



Smile

- Керамическая
- Поворотная
- Смой чашу
- Наполнение стакана



**EASY
LIFT
EFFECTIVE**

- Керамическая
- Поворотная
- Смой чашу
- Наполнение стакана
- Простая разборка для очистки



Педали управления установкой



Мультифункциональная педаль управления FCR 1-6 (FCR 1-7)

- Проводное или беспроводное исполнение
- **Функции:**
 - ✓ Скорость и мощность инструментов, продувка
 - ✓ Движения кресла
 - ✓ Наполнение стакана
 - ✓ Работа светильника



Светильники для установок Chirana



LED - A

- 5000 – 6000 K
- 6000 – 32000 LUX
- Бестеневое освещение



FARO MAIA LED

- 5000 K
- 3000 – 35000 LUX
- Бестеневое освещение



FARO ALYA LED

- 5000 K
- 3000 – 50000 LUX
- Бестеневое освещение

Chirana Smile

- Оптимальный выбор для общей стоматологии
- Отличное соотношение цены и качества
- Стандартный набор функций и инструментов
- До 5 инструментов на столике врача
- Простое управление, легкое обучение
- Возможность расширения столика врача для совершения любых манипуляций в области стоматологической практике.
- Механическое управление гидроблока




Chirana Easy

- Оптимальный выбор для современной стоматологической клиники
- Многочисленные варианты исполнения конструкции
- Широкий выбор опций и возможностей
- 5 инструментов на столике врача



Варианты исполнения

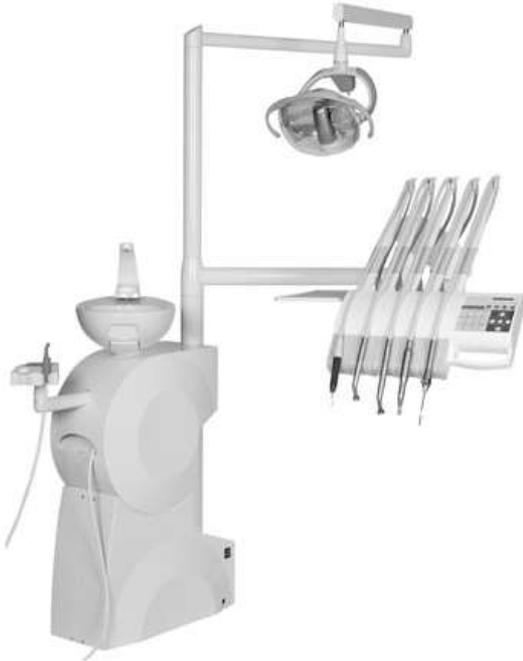

EASY (стационарное)
Крепление гидроблока к полу



Chirana EasySU CART
Отдельно стоящий столик врача на колесиках



Chirana Easy M
Учебный модуль

Chirana Lift

- Специальное решение для исключительных случаев
- Максимальное пространство для ног врача и ассистента
- Удобное расположение подкатных стульев
- Всегда свободный пол
- Лёгкость уборки
- Самая компактная модель
- Нагрузка до 150 кг



Chirana Effective

- Максимальная технологичность, эргономика и функционал.
- Возможность оснащения столика врача сенсорной клавиатурой
- Потенциал в расширении ассортимента инструмента



Стоматологические установки Chirana




Smile

Простое и надежное решение
Отсутствие электроники в столике ассистента. Механическое управление
Самое доступное по цене решение



Cheese (Lift)

Установка с упором на компактность и удобство работы
Широкие возможности оснащения

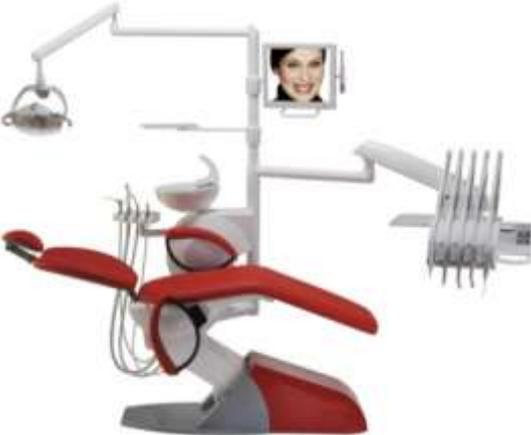

Cheese Easy

Установка более продвинутого уровня
Большее количество электронных компонентов
Больше функций и настроек



Cheese E (Effective)

Максимальная технологичность, эргономика и функционал.
Возможность оснащения столика врача сенсорной клавиатурой
Потенциал в расширении ассортимента инструмента

Подача инструментов

	Верхняя подача инструментов	Нижняя подача инструментов	Карт с нижним расположением инструментов	Учебный модуль Верхняя подача
Smile				
Easy				
Lift				

Набор инструментов врача

	Smile	Easy	LIFT	EFFECTIVE
Инструмент врача				
Турбинный шланг MIDWEST	+	+	+	+
Принадлежности к MCX/CH660	+	+	+	+
Пистолет Chirana/LUZZANI 3F	+	+	+	+
Инструмент ассистента				
Шланг слюноотсоса	+	+	+	+
Шланг отсоса	Опция	Опция	Опция	Опция

Кресла



SK1.01



SK1.08

Регулировка наклона сиденья и спинки



SK1.01



SK1.08

Расцветка кресла, стула – на выбор, детское сиденье



SK1.01

SK1.08

Подлокотники откидываются вперед



SK1.01



SK1.08

Подголовник



- Регулировка подголовника для людей любого роста и для удобства маленьких пациентов



Стулья



20279 sahara	20287 peony	20283 burgundy	07479 carmin red	07478 cinnabar red
20280 capucine	20299 yellow	20291 fichen	20300 bamboo	20282 cedra
20290 baltic	20294 turquoise	20289 oslo	20288 capri	10295 ink
20237 taupe	20278 brandy	20285 havana	20129 chocolate	20161 mist
07432 mouse grey	00002 black			



Chirana Smile 5

Стул ассистента.

Регулировка сиденья по высоте

Регулировка опоры по высоте и вылету

Chirana Smile 3

Стул / врача ассистента.

Регулировка сиденья по высоте

и спинки по углу наклона

Специальное предложение от Chirana Medical, Bien-Air и Contact



Комплект DMCX

- Принадлежности
- Шланг микромотора
- Микромотор MCX LED



Наконечник CA 1:1

- Угловой наконечник со светом



Black Pearl ECO

- Турбинный наконечник без света

Благодарим за внимание!